

防爆安全柜系列



广州兴工智能科技有限公司分目录

产品目录

目录

一：防火安全柜-----页码：2-3



二：常规毒品柜-----页码：4-5



三：恒温毒品柜-----页码：6-9



四：耐强酸碱柜-----页码：10-11



* 防火安全柜

兴工防火安全柜型号规格表



型 号	美制加仑	可调层板数	门类型	外型尺寸 (长*宽*高/毫米)	颜 色
SC4F	4 加仑	1	单门/手动	430*430*560	红/黄/蓝
SC12F	12 加仑	1	单门/手动	590*460*890	红/黄/蓝
SC22F	22 加仑	1	双门/手动	890*560*890	红/黄/蓝
SC300F	30 加仑	1	双门/手动	1090*460*1120	红/黄/蓝
SC450F	45 加仑	2	双门/手动	1090*460*1650	红/黄/蓝
SC600F	60 加仑	2	双门/手动	860*860*1650	红/黄/蓝
SC900F	90 加仑	2	双门/手动	1090*860*1650	红/黄/蓝
SC F	其他/定制尺寸命名规则：如：900×500×1800，就是 SC9050180F				

* 防火安全柜

防火安全柜的技术参数说明

防火安全柜关键功能：

一：减少火灾带来的人员受伤的危险。

二：隔离危险液体，他们组织快速和容易识别。

三：符合 OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30 标准。

消防防火认证：

经过 FM Approved 消防
防火防爆认证，提供 FM
消防认证证书

(FM 认证官网可查询)

防火安全柜技术参数特点：

A. 全部采用双层防火构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的空气绝缘层

B. 厚度大于 1.0mm 的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好

C. 独特设计的三点联动式门锁，轻松自如启闭 180 度的双层，柜门配有双钥匙

D. 5 厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢

E. 装设有防闭火装置的双透气孔

F. 独有的防溢漏式层板可在每 6 厘米层挡上下之间自由调节

G. 柜子内外都喷涂有环氧树脂烤漆，防腐蚀能力更强

H. 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

可为您的安全柜加装排风装置

* 常规毒品柜

兴工常规毒品柜型号规格表



型 号	美制加仑	可调层板	门类型	外型尺寸(长*宽*高/ 毫米)	颜 色
XGD4F	4 加仑	1	单门/手动	430*430*560	灰/黄/蓝
XGD12F	12 加仑	1	单门/手动	590*460*890	灰/黄/蓝
XGD22F	22 加仑	1	双门/手动	890*560*890	灰/黄/蓝
XGD300F	30 加仑	1	双门/手动	1090*460*1120	灰/黄/蓝
XGD450F	45 加仑	2	双门/手动	1090*460*1650	灰/黄/蓝
XGD600F	60 加仑	2	双门/手动	860*860*1650	灰/黄/蓝
XGD900F	90 加仑	2	双门/手动	1090*860*1650	灰/黄/蓝
XGD F	其他/定制尺寸命名规则：如：900×500×1800，就是 XGD9050180F				

* 常规毒品柜

毒品柜的技术参数说明

毒品柜关键功能：

易制毒化学品储存柜是用于存放乙醚，甲苯，氰化物等剧毒物，易制毒化学品等等危化品的安全防护用品；

特点：

双层加厚钢板，密码输错或严重撞击轰鸣报警！

毒品柜技术参数：

- * 高质量的安全柜符合 OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA CODE30 标准；
- * 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的绝缘层；
- * 独有的防溢漏式层板可在每 6 厘米层挡上下之间自由调节，每层镀锌钢层板上可选配耐强酸碱腐蚀的 PP 托盘；
- * 厚度大于 1.0mm 的优质钢板经过点焊接，* 装设有防闭火装置的双透气孔，使用寿命更长，防火性更好；
- * 液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高；
- * 5 厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
- * 专业规范的警示标签显而易见；
- * 柜子经酸洗磷化，内外都喷涂有环氧树脂漆；
- * 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

安全建议！

您可以为您的安全储存柜选配通风装置或过滤装置，可以将有害气体及时过滤或者排出室外，保护工作人员安全！

* 恒温毒品柜

兴工恒温毒品柜型号规格表



型号	容积	联网功能	最低/最高温 (度)	外型尺寸 (长*宽*高/毫米)	颜色
XGD50F-5	50 升	否	-5/常温	600*500*600	白/蓝
XGD50F-25	50 升	否	-25 度/常温	600*500*600	白/蓝
XGD50F-W-5	50 升	是	-5/常温	600*500*600	白/蓝
XGD50F-W-25	50 升	是	-25 度/常温	600*500*600	白/蓝
XGD180F	180 升	否	-5/常温	600*500*1600	白/蓝
XGD180F-25	180 升	否	-25 度/常温	600*500*1600	白/蓝
XGD180F-W	180 升	是	-5/常温	600*500*1600	白/蓝
XGD180F-W-25	180 升	是	-25 度/常温	600*500*1600	白/蓝
XGD F/-W/-5/-25	其他/定制尺寸命名规则：如：900×500×1800，就是 XGD9050180F，后面带-W 表示带联网功能，后面带-5 或者-25 表示最低温度为-5 度或者-25 度				

* 恒温毒品柜


恒温毒品柜的主要参数



- 自动温度控制
- 风冷无霜
- 防盗
- 红外报警
- 消防警示
- 滤毒功能
- 防碰保护
- 联网保护
- 获得国家专利

* 恒温毒品柜

恒温毒品柜的主要特点

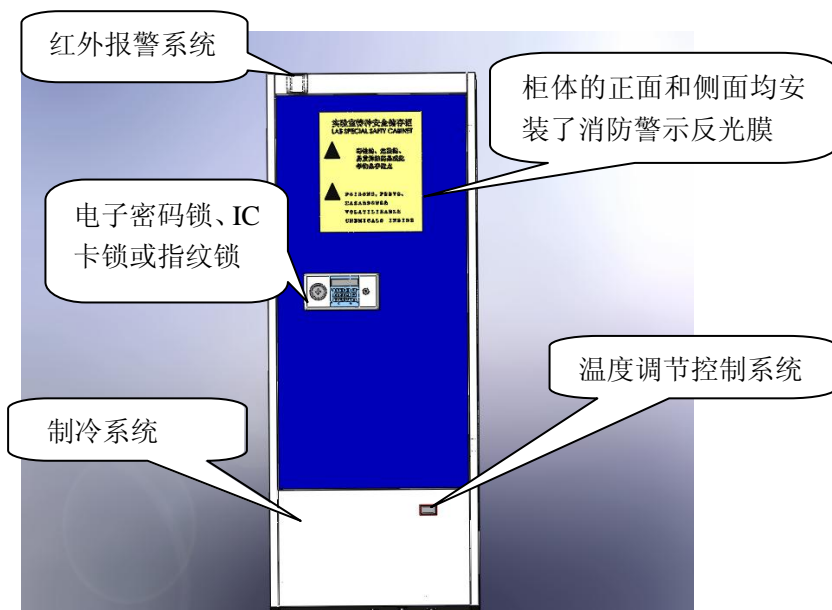

自动温度控制

安装有自动温度控制系统，柜内温度可以设定。

- 温度控制范围 -2℃~室温
- 温度控制精度 ±2℃



红外报警

紧急情况可以使用遥控器呼救报警。无人值守时可以设置红外报警。

- 无线遥控距离 >10m



消防警示

在柜体的正面和侧面均安装有荧光反光膜警示标志

防盗



柜体采用优质的厚钢板并经过先进处理，一体化结构更加坚固；柜体和柜门的连接采用独特的内铰链专利设计，外部看不到铰链、完美的解决了厚达 72mm 柜门的安装问题，安全美观；柜体安装了防钻防撬机械锁，和应急机械锁；安全、可靠；除机械锁外，柜体还安装了电子密码锁。

滤毒



使用毒品柜的使用者经常抱怨开柜门时有异味呛鼻子，实际上这是由于柜内药品（如水厂检查用的氯化物）慢性挥发或分解产生的，或者某些药品固有的气味所致。长期接触或呼吸这些有毒的气体对人体将造成较大的损害。X G 系列毒性药品柜全部加有专利设计的滤毒板，再通过特有的内部空气循环系统，可以有效地吸附柜内有毒

* 恒温毒品柜

恒温毒品柜的技术参数表格

序号	功能	说明	技术参数
0	尺寸		600*500*1600
1	钢板整体成型	增加防盗性能	● 钢厚度>1.2mm
2	红外防盗报警	对非法侵入立即报警	● 报警距离>10m ● 报警声音>80dB ● 无误报
3	遥控布防撤防	实现布防撤防的远程操作	● 遥控距离>10m
4	紧急报警	当使用者受到胁迫时可以按下随身携带的遥控器上的紧急按钮启动报警	● 遥控距离>10m ● 报警声音>80dB
5	自动温控	柜内温度可以设定,保证有毒药品不挥发	● 工作环境温度: 0~40℃ ● 温度控制范围-2℃~30℃ ● 控制精度±2℃
6	风冷无霜	传统直冷模式,在降温时会结霜,不但要定期除霜,而且除霜产生的水份容易污染柜内药品。所以必须采用风冷模式,保持柜体内干燥。	
7	三锁配置	具有机械锁\密码锁\应急锁,可以满足国家毒品管理要求的严格规定	● 密码 3 次错误报警 ● 电子密码有 2 级,管理者可以取消使用者的使用权限.消除因调离而导致无法管理的缺陷 ● 开锁自动记录
8	开门自动记录		● 记录不小于 10 次
9	柜体显著消防标志警示	在出现消防警情时,有毒物品必须得到迅速而有效的处理,否则容易出现叠加事故。所以毒品柜必须有显著的标志,消防员可以迅速发现识别,采取应急措施	● 在柜体正面侧面粘贴有反光警示,即使在晚上也可以被迅速识别
10	柜内安装滤毒板	柜内有毒物品存在一定挥发性时,在开门时容易对使用者造成伤害,所以柜体内必须安装滤毒板	● 滤毒板面积不小于 0.5m ²
11	柜体内胆防腐材料一次成型		● 材料为 HIPS 或者 PVC(防腐)
12	外壳防腐工艺处理	为了适应实验室环境,箱体必须能够耐酸碱腐蚀	

* 耐强酸碱柜

兴工耐强势柜型号规格表





型 号	美制加仑	可调层板	门类型	外型尺寸 (长*宽*高/毫米)	颜 色
XGPP9045180F	50 加仑	3	双门/手动	900*450*1800	瓷白/灰
XGPP4F	4 加仑	1	单门/手动	430*430*560	瓷白/灰
XGPP12F	12 加仑	1	单门/手动	590*460*890	瓷白/灰
XGPP22F	22 加仑	1	双门/手动	890*560*890	瓷白/灰
XGPP300F	30 加仑	1	双门/手动	1090*460*1120	瓷白/灰
XGPP450F	45 加仑	2	双门/手动	1090*460*1650	瓷白/灰
XGPP600F	60 加仑	2	双门/手动	860*860*1650	瓷白/灰
XGPP900F	90 加仑	2	双门/手动	1090*860*1650	瓷白/灰
XGPP F	其他/定制尺寸命名规则：如：900×500×1800，就是 XGPP9050180F				

* 耐强酸碱柜

耐强酸碱柜的技术参数说明

关键功能：

耐酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。适用于实验室各类酸碱药品的储存，实验室器具洗涤完后的储存等等。

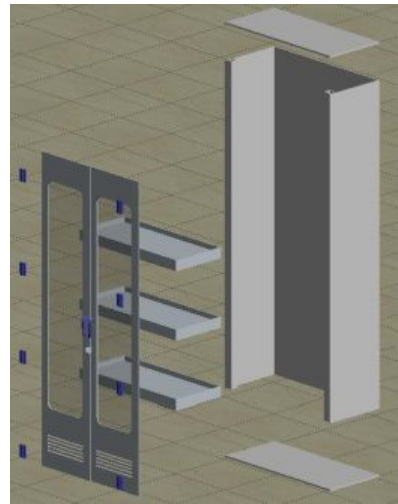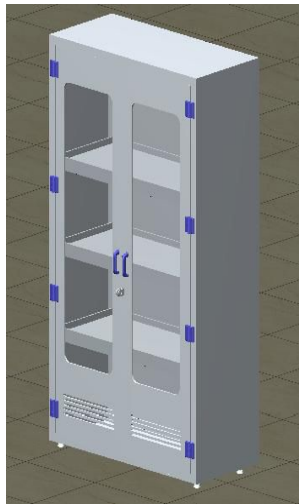

耐酸碱柜特点：

- 一：具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
 - 二：降低环境污染，维护使用者的健康。
 - 三：柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
- 永不生锈和受潮！

耐强酸碱柜技术参数：

- * 本体：采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色 PP 板(原装进口)承制，具永久性，厚度 8mm，抗强酸、化学药品，耐冲击，
- * 不腐蚀，不生锈。
- * 铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质 PP 聚丙烯材料制作
- * 调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。
- * 非标规格：，可依照客户需求定制。
- * 可为您的安全柜加装排风装置

* 气瓶柜

气瓶柜规格表



型号	美制加仑	可调层板数	自动报警排风	外型尺寸 (长*宽*高/毫米)	颜色
XGQ1F	1	单	否	600*450*1800	灰/红/黄
XGQ1F-B	1	单	是	600*450*1800	灰/红/黄
XGQ2F	2	单	否	900*450*1800	灰/红/黄
XGQ2F-B	2	单	是	900*450*1800	灰/红/黄
XGQ3F	3	单	否	1200*450*1800	灰/红/黄
XGQ3F-B	3	单	是	1200*450*1800	灰/红/黄
XGQ1F-S	1	双层	否	600*450*1800	灰/红/黄
XGQ1F-S-B	1	双层	是	600*450*1800	灰/红/黄
XGQ2F-S	2	双层	否	900*450*1800	灰/红/黄
XGQ2F-S-B	2	双层	是	900*450*1800	灰/红/黄
XGQ3F-S	3	双层	否	1200*450*1800	灰/红/黄
XGQ3F-S-B	3	双层	是	1200*450*1800	灰/红/黄
XGQ F/-S/-B	其他/定制尺寸命名规则：如：900×500×1800，就是 XGQ9050180F，后面带-S 表示双层钢板结构，后面带-B 表示带自动报警排风功能				

* 气瓶柜

气瓶柜的技术参数说明

关键功能：

气瓶柜是用来存放气瓶的安全柜，也叫气瓶防爆柜，气体防爆柜。是可以用来储存各类危险气体的安全防护用品柜。在日常生产过程中会使用不同类型的气体，如甲烷、乙炔、煤气、氢气、氧气、惰性气体等。

气瓶柜电气参数：

电源：AC220V、50HZ

恢复正常工作时间：≤30s

工作功率：40W（排风状态时）

警报方式：声、光报警

报警音量：≥80dB 响应时间≤30s

气瓶柜技术参数：

- 1.柜体：采用 1.0mm 厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；
- 2.门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；
- 3.PASS 孔：柜体侧面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动；
- 4.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；
- 5.踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；
- 6.拉手：采用嵌入式高强度拉手。
- 7.报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；
- 8.声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；
- 9.自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全；

更多安全储存柜，通风柜，实验台，通风系统，净化系统，洁净系统，实验室规划设计资料，请查看 XINGGONG 其他完整目录：


XG

XINGGONG[®]

实验室系统



更多安全储存柜，通风柜，实验台，通风系统，净化系统，洁净系统，实验室规划设计资料，请查看 XINGGONG 其他完整目录：

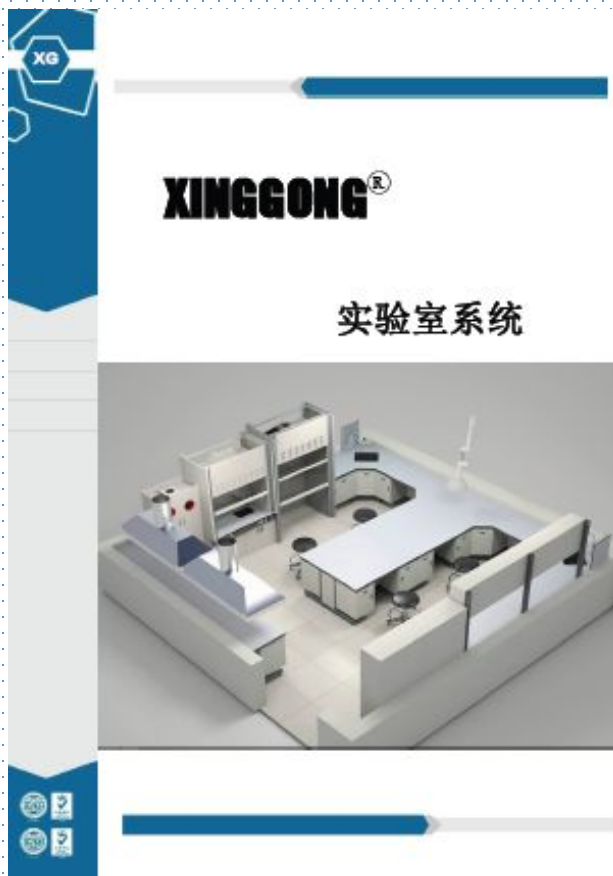

广州兴工智能科技有限公司

中国广东省广州天河区中山大道中 995 号

电 话： 020-32215102 020-32215927

传 真： 020-32215817

网 址： www.gzxinggong.com

